

**Tecnología Innovadora**  
Para tratamientos de medicina estética

# Noble } HAPE

Sistema de modelado corporal no invasivo


Delinea tu figura y tu vida




# Sinergia de avanzadas tecnologías para un efecto moldeador con NobleSHAPE

## ¡Solución para la grasa y la celulitis!


EunSung es el mejor compañero de un estilo de vida saludable ya que da solución a diversos problemas de obesidad.

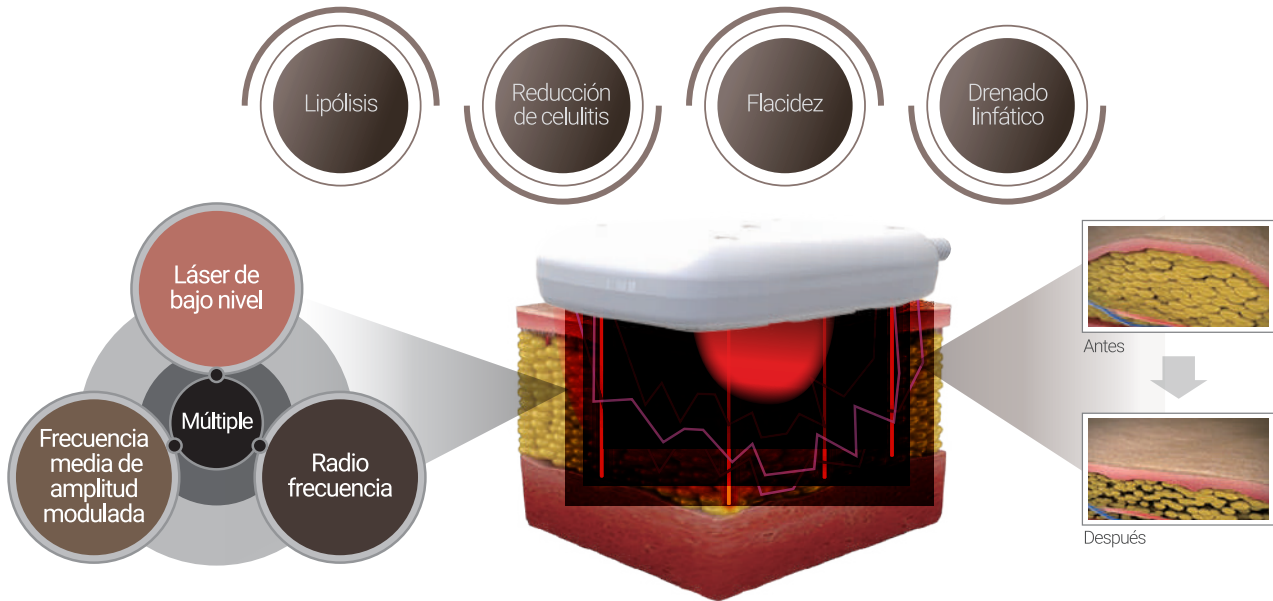


### Láser de bajo nivel

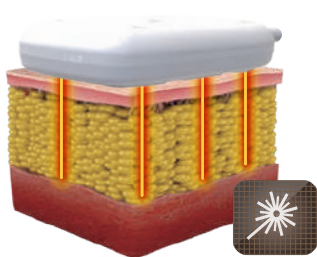

Adipocito saludable

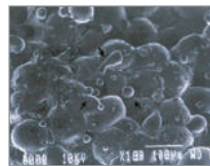


Las membranas celulares del adipocito crean una salida transitoria, permitiendo la filtración del triglicérido.

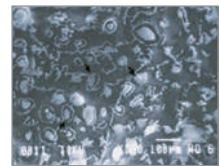

Los adipocitos emulsionados son completamente interrumpidos (reducción de grasa).

※ Licuefacción de grasa: efecto del láser de bajo nivel en tejido adiposo.

### Frecuencia Media de Amplitud Modulada

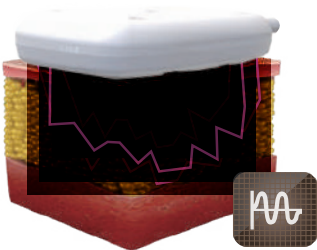

#### Curso 1 Celulitis\_30 min

- Elasticidad de tejido conectivo
- Regeneración de tejido de la piel
- Circulación sanguínea y linfática

#### Curso 2 Lipólisis\_30 min

- Descomposición de grasa
- Circulación sanguínea y linfática
- Vasodilatación

#### Curso 3 Modelado corporal\_30 min

- Fortalecimiento muscular del tejido conectivo
- Tensión y relajación muscular

#### Curso 4 Revitalización\_30 min

- Activación muscular
- Promover el metabolismo


#### Curso 5 Relajación\_30 min

- Circulación sanguínea y linfática
- Promover el metabolismo

#### Curso 6 Drenado linfático\_20 min

- Circulación sanguínea y linfática
- Relajación vascular

### Radio Frecuencia

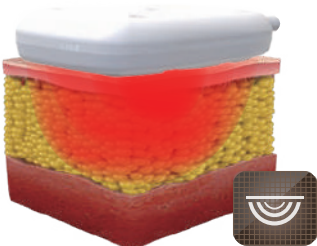

El tratamiento con RF es caracterizado principalmente por calentar el tejido profundo a 42~45°C. El calentamiento profundo continuo da como resultado la reducción de células adiposas y una mejora en el modelado corporal.

# Porqué NobleSHAPE

Existen diversos tipos de obesidad. Distintos patrones de desarrollo de obesidad dependen de la dieta de cada individuo, de su complejión y de factores genéticos. Un cuerpo ideal no se puede obtener por medio de una dieta simple para pérdida de peso.

En el caso particular de la celulitis resultante de una red de piel irregular que está demasiado formada, una simple dieta de bajo nivel calórico no funciona. Para corregir con tales deficiencias, NobleSHAPE está desarrollado para tratar múltiples tipos de obesidad.



## Ventajas

4 canales en 8 almohadillas



Tratamiento rápido en un lapso de 30 min.



Tratamiento no invasivo



Apagado automático a temperaturas irregulares



Reducción de células grasas / Reducción de talla



Sin tiempo de inactividad




## Eficacia comprobada

### Abdomen / 4 Sesiones



Antes

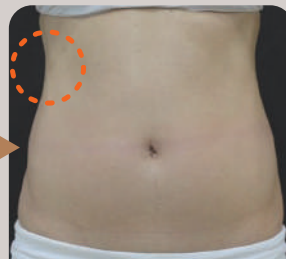

Después

- Progreso de una Mujer de 40
- Escaneo de ultrasonido después de tratamiento LLL, AMF, RF.

### Abdomen / 6 sesiones




Antes



Después

- Progreso de un Hombre de 30
- Escaneo de ultrasonido después de tratamiento LLL, AMF, RF.

## • Áreas de aplicación

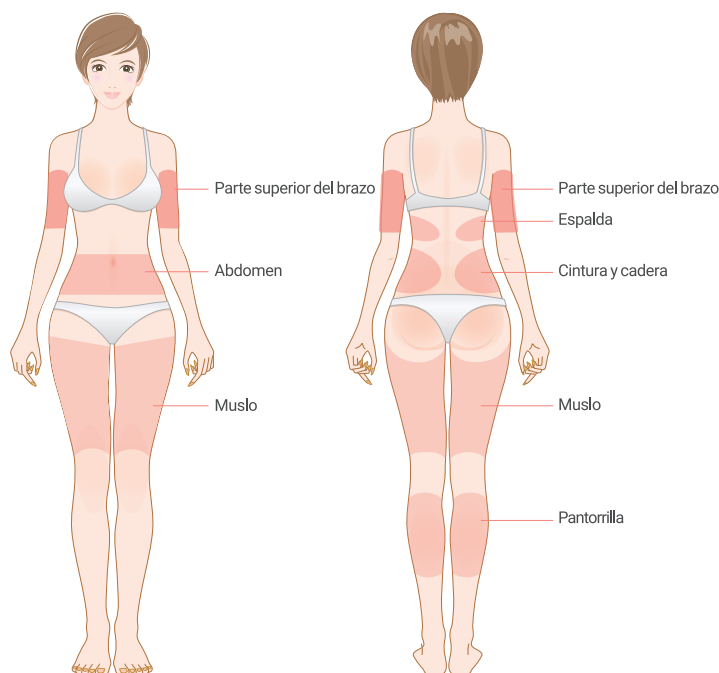


## • Estructura de la almohadilla

Pieza de mano con tres funciones para manejo complejo




## • Guía de usuario


Mientras se usa una almohadilla.

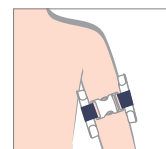


Parte superior del brazo

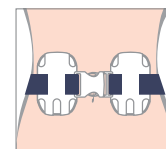


Abdomen Delantero Posterior / Lateral

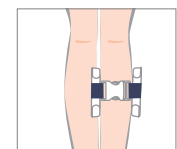


Pantorrilla

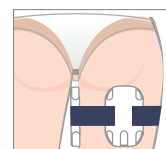

Muslo interior y posterior

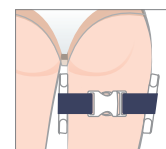

Muslo interno y externo

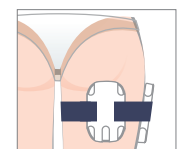

Muslo exterior y posterior



### Especificaciones

Tipo de energía	Láser de bajo nivel: 658nm (40mW) Frecuencia Media de Amplitud Modulada: 1~4,000Hz Radio Frecuencia: 1MHz
Almohadilla	Grande (x4ea) (95x163.1x23.7) Mediano (x4ea) (75x133.1x23.7)
Energía de entrada	Voltaje: 110V / Consumo de energía: 300VA
Dimensión (mm)	Cuerpo: 394.6(Am)x 482.1(P)x264.3(A)

